


SORBACT[®] FOAM GENTLE BORDER

Mikroobe siduv vahthaavaside silikoonist kleepäärega

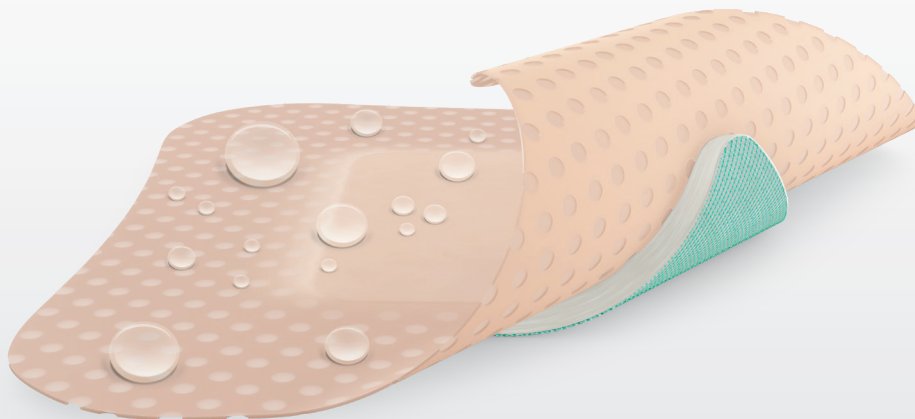

BIOKOORMUST VÄHENDAV KÕIK-ÜHES ATRAUMAATILINE HAAVASIDE


Sorbact[®] Foam Gentle Border on steriilne, baktereid- ja seenorganisme siduv, isekleepuv ja imav haavaside. Sellel on roheline haavakontaktkiht Sorbact[®], mis imab eksudaati ja hoiab seda endas, vähendades matsratsiooni (nahakudede lagunemise) ohtu ja soodustades niisket haavakeskkonda. Pehme, nahasõbralik, kleepuv silikoonserv võimaldab haavasidet atraumaatiliselt vahetada. Sorbact[®] Foam Gentle Border tagab haava paranemiseks optimaalsed tingimused.

Toode	Tootekood	Suurus	Padja suurus	Tk/pakis
Sorbact [®] Foam Gentle Border	98531	7,5 x 7,5 cm	3,5 x 3,5 cm	10
Sorbact [®] Foam Gentle Border	98532	10 x 10 cm	5 x 5 cm	10
Sorbact [®] Foam Gentle Border	98533	15 x 15 cm	10,5 x 10,5 cm	10




KASUTUSALAD

Sorbact® Foam Gentle Border on mõeldud puhta, saastunud, mõõdukalt kuni rohkelt eksudaati eritava koloniseeritud või nakatunud haava hooldamiseks (nt operatsioonihaavad, traumahaavad, lamatishaavandid, diabeetilised haavandid ning labajala- ja jalahaavandid).

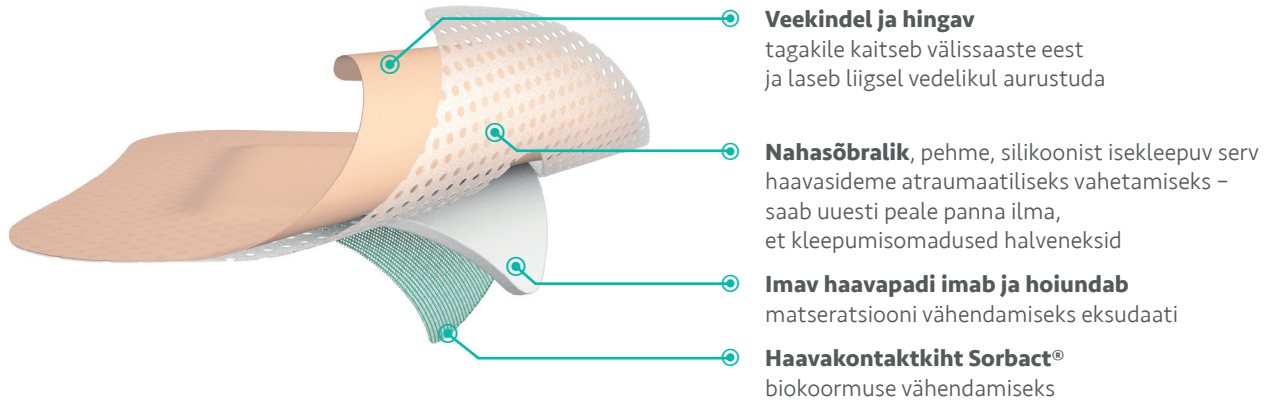

KASUTUSJUHEND

1. Valmistage haav kohalikust kliinilisest tavast lähtuvalt ette. Veenduge, et ümbritsev nahk oleks puhas ja kuiv.
2. Valige haavale sobiva suurusega haavaside. Matseratsiooni esinemisohu vähendamiseks peaks haavapadi haava servadest 1 cm võrra üle ulatuma.
3. Kasutage haavasideme ümbrise eemaldamiseks aseptilist tehnikat.
4. Eemaldage haavasideme haavaga kokkupuutuvalt poolelt kaitsekile.
5. Pange side haavale. Äрге venitage. Veenduge, et roheline haavakontaktkiht kataks kogu haava pinda.
6. Suruge servad õrnalt ümbritseva naha vastu. Vajaduse korral saab haavasidet reguleerida ja uuesti peale panna.
7. Haavasideme vahetussagedus sõltub eksudaadi kogusest ning haava ja seda ümbritseva ala üldisest seisundist. Kui kliiniline seisund seda võimaldab, võib sideme jätta haavale kuni seitsmeks päevaks. Sobib kompressioonteraapias kasutamiseks.

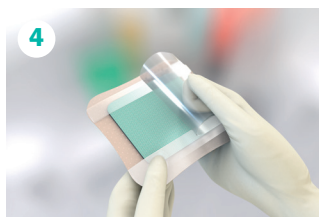

Tervishoiutöötajad peavad veenduma, et toodet kasutatakse tootja kasutusjuhendiga kooskõlas.

SORBACT® KOHE ALGUSEST SOBIVAIM ENNETAB HAAVAINFEKTSIOONIDE TEKET JA RAVIB HAAVAINFEKTSIOONE

Sorbact® mikroobe siduv haavaside ennetab biokoormuse vähendamise läbi haavainfektsioonide teket ja ravib haavainfektsioone. Mikroobid kinnituvad haavasideme pinnale ja eemaldatakse sideme vahetamisel.

Sorbact® on Rootsi innovatsioon ning ABIGO partnerite ja turustajate kaudu on kogu haavasideme tootevalik kättesaadav enam kui 65 riigis kogu maailmas. Mõnes riigis on toode Sorbact® saadaval kaubamärkide Cutimed® Sorbact® ja Leukomed® Sorbact® nime all. Leidke kohalik turustaja veebisaidilt abigo.com. Sorbact® on ettevõtte ABIGO Medical AB registreeritud kaubamärk.